

ACEMST1 svítidlo pro vyšetření s LED technologií

ACEMST1 je nové LED svítidlo vyráběné společností ACEM, Je vhodné pro různé specializace, jako je dermatologie, všeobecná medicína, gynekologie nebo zubní lékařství. Univerzálnost použití spolu s vynikajícím osvětlením je důležité pro každé vyšetření. Je ideální pro diagnostiku, lékařskou kosmetiku, první pomoc, pooperační místnost nebo lůžkové osvětlení.



ACEMST1 nabízí všechny výhody LED technologie a díky své flexibilitě je vhodné pro široké použití.

Zajišťuje:

- vynikající intenzitu osvětlení
- světlo bez IR záření
- variabilní teplotu barev (CCT)
- vysoký index podání barev (CRI)
- dlouhou životnost
- nízkou spotřebu energie

ACEMST1 má kompaktní a funkční design.

- má hladký, snadno čistitelný a dezinfikovatelný povrch pro zajištění vynikající čistoty
- je snadno polohovatelné a jeho systém dvojitého vyvážení zajišťuje stabilitu a přesnost po celou dobu používání
- má široký rozsah otáčení a pohybu



Podle potřeby je svítidlo k dispozici ve dvou modelech:

ACEMST1.1


Dotykový panel ovládá všechny funkce svítidla

- Zapnuto / vypnuto
- Nastavení intenzity světla

ACEMST1.3

Dotykový panel ovládá všechny funkce svítidla

- Zapnuto / Vypnuto (nebo pomocí gesta)
- Nastavení intenzity světla
- Nastavení teploty barev (plynule)

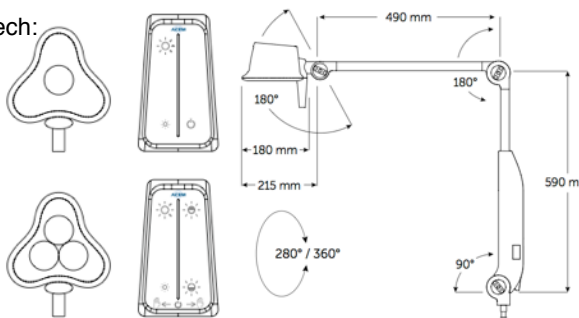

A = FROM 600 mm
TO 1,100 mm

B = 330°



A = 370 mm

B = 105 mm

C = 360°

D = 180°



A = 680 mm

B = FROM 800 mm
TO 1,300 mm

C = 360°



Technické parametry

Třída zařazení (EN 60601-2-41)

Napájení

Verze s nízkým DC napětím

Spotřeba energie

Zdroj světla

Životnost zdroje světla

Intenzita osvětlení

Nastavení světla

Barevná teplota (CCT)

Index barevného podání (Ra)

Průměr světelného pole D₁₀

Průměr světelné hlavy

Hmotnost světelné hlavy a ramene

Hmotnost stojanu

Varianty provedení (obě verze)

Barva (obě verze)

ACEMST1.1

I

100 - 240 V ± 10%, 50/60 Hz

24 Vdc

10 VA

1 LED dioda

cca 60.000 hodin

60.000 lx / 50 cm

0% - 100%

4.500 °K

98

26 cm

18 cm

1 kg

3 kg

stropní, nástěnné, nástěnné s prodloužením, stolní, na eurolištu, na pojízdném stojanu

bílá RAL 9010 / RAL7016 (černošedá)

ACEMST1.3

I

100 - 240 V ± 10%, 50/60 Hz

24 Vdc

12 VA

3 LED diody

cca 60.000 hodin

100.000 lx / 50 cm

0% - 100%

3.000 °K - 5.500 °K (plynule)

98


26 cm


18 cm


1 kg


3 kg

Volitelné barvy (obě verze)

 bílá RAL 9010 / RAL 6019

 bílá RAL 9010 / RAL 5024

 bílá RAL 9010 / RAL 4003

 bílá RAL 9010 / RAL 7035