
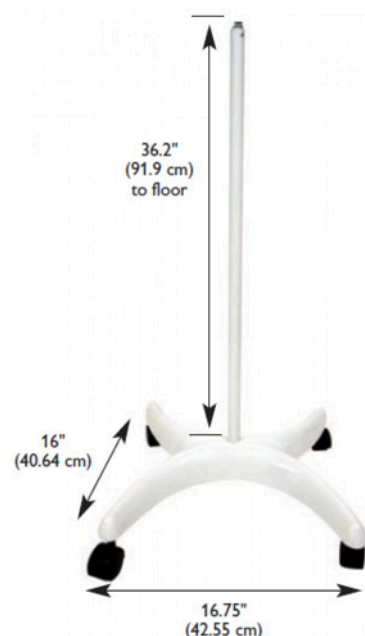
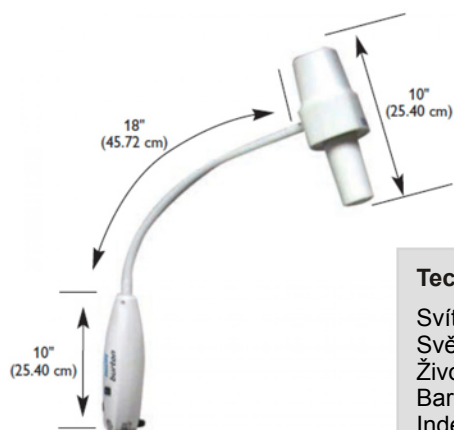


Super Bright Spot

Halogenové vyšetřovací svítidlo ideální pro porodnictví, gynekologii, urologii ...

Super Bright Spot prakticky nevydává teplo. Je to dáno 20-wattovou halogenovou žárovkou a dichroickým reflektorem, který filtruje infračervené paprsky. Svítidlo dále nabízí světelnou stopu o průměru 10 - 13 cm a životnost žárovky 2000 hodin. Super Bright Spot má robustní, odolný husí krk a je dodáváno se stojanem nebo s uchycením na zeď. Vysoce kvalitní, prostorově úsporný a bezpečný stojan má 4 kolečka, z toho 2 zamykatelná.

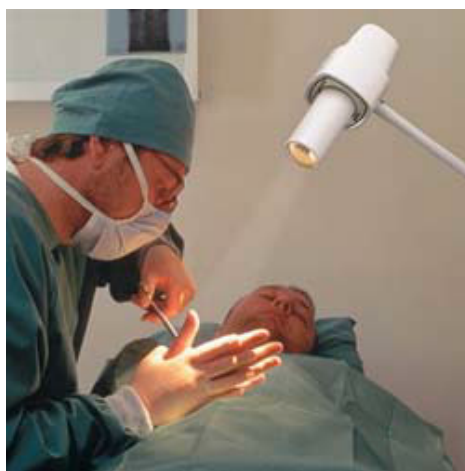

Technické parametry

Technické parametry	Super Bright Spot
Svítivost	56.000 lx / 46 cm
Světelný zdroj	halogenová 20 W žárovka
Životnost světelného zdroje	2.000 hodin
Barevná teplota	3.400 °K (přirodní zbarvení)
Index podání barev (CRI)	Ra = 98
Světelná stopa	10 - 13 cm

Schvalovací normy a certifikáty:

UL/IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
EN/ IEC 60601-2-41 a CAN/CSA C22.2 NO. 601.1 M90
CE označení